




**SUPER ULSTAR**  
**Páipéar Teirmeach le haghaidh**  
**Printéir Físe**

**Treoracha le húsáid**

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid Durico C&T, Inc. iad "SUPER ULSTAR" agus marcanna eile.

Is le húinéirí faoi seach gach trádmharc eile.

Mionathraithe go deireanach: Samhain 2020

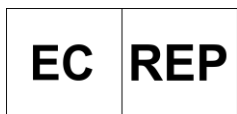

DURICO IMAGING BVBA

Villastraat 2C

1830 Machelen, Belgium



DURICO C&T, INC.

33 Oedap 6-gil, Sangju-si

Gyeongsangbuk-do 37240, Republic of Korea

Contact point

Website: [www.durico.co.kr](http://www.durico.co.kr)

E-mail: [info@durico.co.kr](mailto:info@durico.co.kr)

Tel: +82-2-525-8405

Fax: +82-2-525-7461

## 1. Eolas Ginearálta ar Tháirgí:

a. Ainm an Táirge: Páipéar Teirmeach le haghaidh Printéir Físe

b. Ainm Branda: SUPER ULSTAR

c. Múnlaí Infheidhme:

- SUPER ULSTAR-1100HG
- SUPER ULSTAR-1100HD
- SUPER ULSTAR-1100HD MIBI
- SUPER ULSTAR-1100HD Matt
- SUPER ULSTAR-1100S
- SUPER ULSTAR-1100S MIBI
- SUPER ULSTAR-2100HD
- SUPER ULSTAR-840HG
- SUPER ULSTAR-840S

d. Monaróir: Durico C&T, Inc.

e. Seoladh an mhonaróra

33 Oedap 6-Gil, Sangju-Si

Gyeongsangbuk-Do 37240 Poblacht na Cóiré

f. Beartaithe Purpose:

Tá sé beartaithe an táirge seo a úsáid mar chúlpháirtí inchaite le Printéirí Físe Cineál Teirmeach chun íomhánna físe a gabhadh ó ghléas diagnóiseach ultrafhuaime a phriontáil agus a stóráil. Tá an táirge seo beartaithe le húsáid i dtimpeallachtaí míochaine, mar chlinicí agus ospidéil. Is iad na príomhúsáideoirí sprice gairmithe míochaine, lena n-áirítear raideolaithe agus cnáimhseoirí, a dhéanann scrúdú ar othair agus / nó ar fhéatas trí ultrasonography. Tá na híomhánna atá clóite ar an táirge seo le haghaidh úsáide taifead othair agus atreoraithe amháin agus níl sé beartaithe iad a úsáid chun críche diagnóiseacha.

g. Sonraíochtaí Táirgí:

Grade	Size	Feature	Number of Prints
SUPER ULSTAR-1100HG	110mm×18m	High Glossy	193
SUPER ULSTAR-1100HD	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	110mm×20m	High Density Matt	215
SUPER ULSTAR-1100S	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-1100S MIBI	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-2100HD	210mm×25m	High Density	139
SUPER ULSTAR-840HG	84mm×12.5m	High Glossy	104
SUPER ULSTAR-840S	84mm×13.5m	Standard	112

#### h. Comhoiriúnacht:

Grade	Compatibility		Printer	
	Sony	Mitsubishi	Sony	Mitsubishi
SUPER ULSTAR-1100HG	UPP-110HG (Type V)	K95H/K91HG/KP91HG	UP-898 / 897 / 895 Series	P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI		K65HM/KP65HM		P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S	UPP-110S (Type I)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S MIBI		K61S/KP61S/KP61B		P95 / P93
SUPER ULSTAR-2100HD	UPP-210HD (Type II)		UP-991AD / 990AD / 971AD / 970AD	
SUPER ULSTAR-840HG	UPP-84HG (Type V)		UP-711MD	
SUPER ULSTAR-840S	UPP-84S (Type I)		UP-711MD	

#### i. Saintréithe Feidhmíochta:

Éilíonn Priontáil Íomhá Leighis cruinneas ard atá ar fáil ón modh priontála teirmeach. Úsáideann printéir theirmeach teas chun íomhá a phriontáil ar pháipéir theirmeacha, atá brataithe go speisialta chun dromchla an pháipéir a dhéanamh íogair do impulses teirmeacha. Is fearr printéirí teirmeacha seachas cineálacha eile printéirí mar áis dóibh toisc nach dteastaíonn earraí inchaite breise uathu mar chartúis dúch nó tonóirí. Dearadh an táirge seo chun oibriú go foirfe i gcomhcheangal leis na printéirí a sonraíodh sa Chairt Comhoiriúnachta den chlásal roimhe seo.

#### j. N.ote

Ní feiste leighis ann féin an táirge seo, ach is cúlpháirtí é do fheiste leighis. D'fhéadfadh aicmiú an táirge seo mar fheiste leighis a bheith difriúil de réir tíre. Téigh i gcomhairle le d'ionadaí díolacháin áitiúil nó d'oifig rialála rialtais chun tuilleadh faisnéise a fháil.

## 2. Treoracha Úsáide:

a. Páipéar Neamhphriontáilte a stóráil

- 1) Stóráil páipéar neamhúsáidte in áit fhionnuar dhorcha (faoi bhun 30°C /86°F).
- 2) Ná stóráil in áit te nó tais.
- 3) Ná fág páipéar neamhúsáidte faoi sholas díreach nó in áiteanna geala eile.
- 4) Ná lig aon tuaslagóir orgánach so-ghalaithe nó clóiríd vinile.
- 5) Ná déan teagmháil le dromchla páipéir neamhúsáidte le méara mar is féidir le hiarmhar ó mhéarloing damáiste a dhéanamh don phrintéir.

b. Páipéar a úsáid le haghaidh priontála sa Phrintéir Teirmeach

- 1) Seiceáil agus deimhnigh go bhfuil leithead an rolla páipéir (110<sub>mm</sub>, 210<sub>mm</sub>, nó 84<sub>mm</sub>) comhoiriúnach le sonraíochtaí do phrintéir.
- 2) Déan mála plaisteach a chuimilt ar oscailt chun an rolla páipéir a thógáil amach, agus an greamán atá ceangailte le deireadh an rolla a bhaint.
- 3) Oscail bosca bruscair páipéir an chlódóra agus luchtú an rolla páipéir i gceart sa phrintéir. Féach leat do lámhleabhar treoracha printéir mar tá gach samhail printéir difriúil.
- 4) Bí cúramach gan dromchla páipéir neamhúsáidte a fhilleadh nó teagmháil a dhéanamh leis. Bí cinnte an chéad 15 go 20<sub>cm</sub> (6 go 8 n-orlach) de pháipéar a tharraingt amach agus a scriosadh. B'fhéidir gur bhailigh an chéad chuid seo roinnt deannaigh nó méarloing, rud a d'fhéadfadh droch-chaighdeán priontála a dhéanamh chomh maith le damáiste don chlódóir.
- 5) Dún bosca bruscair luchtaithe an chlódóra agus cas air an printéir.
- 6) Sula ndéantar é a phriontáil, socraigh cumraíocht an cineáil páipéir ar an printéir chun an cineál samhail táirge Durico a mheaitseáil. Mar shampla, roghnaigh S do SUPER ULSTAR-1100S agus SUPER ULSTAR-840S, roghnaigh HD do SUPER ULSTAR-1100HD agus SUPER ULSTAR-2100HD, nó roghnaigh HG do SUPER ULSTAR-1100HG agus SUPER ULSTAR-840HG. Tá difríochtaí idir na treoracha chun an cineál páipéir a chumrú de réir déantús agus samhail printéir, mar sin féach le do thoil ar do lámhleabhar treoracha printéir le haghaidh treoracha mionsonraithe.
- 7) Coigeartaigh na socruithe Codarsnachts agus Gile ar do phrintéir chun na torthaí priontála is fearr a fháil. Ní hionann na treoracha chun codarsnacht agus gile a chumrú de réir déantús agus samhail an chlódóra, mar sin féach leat do lámhleabhar treoracha printéir le

haghaidh treoracha mionsonraithe.

- 8) Teastaíonn cothabháil rialta ón gcuid is mó de na printéirí, lena n-áirítear an ceann teirmeach agus an sorcóir a ghlanadh. Féach leat do lámhleabhar treoracha printéir maidir le treoracha maidir le cothabháil do phrintéir chun na torthaí priontála is fearr a fháil.

c. Stóráil Páipéir Phriontáilte

- 1) Coinnigh an páipéar in áit dorcha, fionnuar agus tirim. Nuair a bheidh sí nochtaithe do theas, taise nó solas na gréine, féadfaidh an íomhá chlóite céimnithe, dath a athrú, nó dorchachadh.
- 2) Ná cuir an méid seo a leanas ar dhromchla an pháipéir chlóite:
  - Téipeanna plaisteacha
  - Scríosadh plaisteach
  - Cóipeáil Toner
  - Vinyl
  - Dúch marcóra
  - Plaisteachóir cosúil le mataí deisce
  - Tuaslagóirí orgánacha so-ghalaithe
  - Alcól
- 3) Seachain méarloirg a fhágáil ar dhromchla an pháipéir chlóite.
- 4) Ná rub an dromchla clóite.
- 5) Ná clúdaigh an páipéar clóite le lannú atá ar fáil go tráchtála. Féadfaidh an lannú a bheith ina chúis leis an íomhá clóite a smideadh nó a dhorchaigh.
- 6) Moltar gach aghaidh leatháin chlóite a stóráil suas, i mála polapróipiléine, nó é a chruachadh le píosa páipéir idir gach bileog.
- 7) T. tá a tháirge le haghaidh úsáide aonair amháin. Ná athúsáid páipéir chlóite.

d. An táirge a dhiúscairt

Ní féidir an táirge seo a athchúrsáil. Déan páipéar a dhiúscairt i gceart de réir do rialacha ginearálta áitiúla maidir le diúscairt dramhaíola tar éis é a úsáid. Ná déan an táirge seo a dhó. Ba cheart duit do rialacháin áitiúla maidir le diúscairt a urramú toisc go bhfuil an táirge seo brataithe le ceimiceáin ar scannán plaisteach. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le d'údarás áitiúil maidir le scannán teirmeach díreach a dhiúscairt.

### 3. Scairbh Saol an táirge:

a. Coinníoll:

- Faoi Choinníoll Gnáthsheomra (Faoi bhun 30°C(86°F) / 80%RH)

b. Téarmaí ráthaíochta:

Táirge gan oscailt - Thart. 3 bliana

#### 4. Rabhadh:

- a. Tá an táirge seo le húsáid i gclódóirí teirmeacha amháin.
- b. Ní feiste leighis ann féin an táirge seo. Is cúlpháirtí é atá beartaithe le húsáid le feiste leighis.
- c. Is le haghaidh úsáide aonair amháin atá an táirge seo. Ná athúsáid aon chuid den táirge seo tar éis a phriontála.
- d. Ná húsáid an Táirge seo má tá an mála plaisteach stróicthe, nó má tá aon pháipéar neamhúsáidte duite.
- e. Ba cheart aon eachtra a tharla maidir le húsáid an táirge a thuairisciú don mhonaróir agus do na húdaráis áitiúla iomchuí.
- f. Nuair a bheidh tú an rolla páipéir a luchtú isteach sa phrintéir, bí cinnte an chéad 15 go 20<sub>cm</sub> (6 go 8 n-orlach) de pháipéar a tharraingt amach agus a scriosadh. B'fhéidir gur bhailigh an chéad chuid seo roinnt deannaigh nó méarloirg, rud a d'fhéadfadh droch-chaighdeán priontála a dhéanamh chomh maith le damáiste don chlódóir.
- g. Láimhseáil an rolla páipéir go cúramach i gcónaí nuair a dhéanann tú é a luchtú / a dhíluchtú isteach / ón printéir chun nach nochtfar an páipéar do dheannach, salachar, méarlorg, srl.